




écran LED clair haute définition

CONCENTRATEUR A OXYGENE 5L/MIN REF : OPTIMOX-5

- OPTIMOX adopte le principe de PSA pour obtenir l'oxygène par la façon physique pure.
- Il peut sans interruption produire l'oxygène d'une façon efficace et sûre.
- Optimox est parfait même pour une utilisation continue de 24h/24h.
- Consommation de puissance faible, 0.3KW/h.
- Ecran LCD lumineux pour les réglages de l'appareil.
- Système alarmant de tension de ciel et terre.
- Alarme de pureté d'oxygène incluse.
- Certifié CE, ISO 13485 et approuvé par TUV SUD.

OPTIMIUM PRO.
PREMIUM HEALTHCARE PRODUCTS

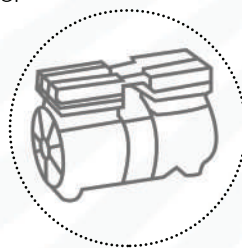

**COMPRESSEUR SANS HUILE,
TECHNOLOGIE USA**


Faible bruit, Léger, faible
élévation de la température,
rendement élevé

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tamis moléculaires durable et efficient (made in USA).
- Couleur : Noir
- Écoulement maximal : 5L/min
- Sortie de nébulisation inclus
- Densité de l'oxygène : 93±96% (V/V)
- Puissance d'énergie : ≤ 480W.
- Bruit : ≤52dB (a).
- Temps de travail continu : 15.000 heures.
- À télécommande facultatif, synchronisation
- et nebulisation de l'oxygène, moniteur de densité
- de l'oxygène.
- Poids Net : 25 Kgs

**TAMIS MOLÉCULAIRE FABRIQUES EN
USA**

pour offrir une pureté maximale de l'oxygène

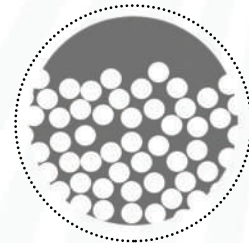

FILTRE INTÉGRÉ SANS NETTOYAGE

avec une excellente fonction de filtration de l'oxygène,
assurant l'évacuation de l'oxygène propre

Accessoires standard inclus :

- Lunettes à oxygène.
- Barboteur.
- Adaptateur pour humidificateur.
- Filtre caisson en PU (Carre et rectangle)
- Kit nébuliseur (OPTIMOX-5N



SAHARA MED
SUPPLIES & SOLUTIONS

Keeping you well ...



06 51 80 22 61
06 77 02 93 38



commercial@saharamed.ma
www.saharamed.ma



N°6 RUE FES AV MOULAY
HICHAM - GUELMIM